


1



Druk de instelknop van de CountAir® in en houdt deze ingedrukt.

2

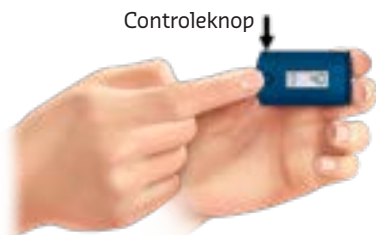

Druk één keer op de controleknop. U ziet nu op het beeldscherm getallen voorbijkomen.

3



Laat de instelknop los wanneer het juiste getal (aantal inhalaties) in beeld komt. De CountAir® is ingesteld.

4



Druk de controleknop in om te controleren of het juiste aantal is ingesteld. Is het niet gelukt, herhaal dan stap 1 t/m 3. Let op dat de letter C links in het beeldscherm staat, dan weet u zeker dat u de CountAir® op de juiste wijze afleest.

5



Haal de beschermcap van de dosisaerosol.

6



Plaats de dosisaerosol in de CountAir® en controleer of deze goed vastzit in de CountAir®.

7



Gebruik de dosisaerosol bij voorkeur altijd in combinatie met een voorzetkamer. Gebruik beide zoals u is uitgelegd door uw zorgverlener.

8



Na de inhalatie toont het beeldscherm het resterend aantal inhalaties. U kunt ook kort op de controleknop drukken.

9



Neem het mondstuk af met een droge tissue en plaats de beschermcap terug.

Goed om te weten



- Scan de QR-code voor het overzicht van dosisaerosolen die in combinatie met de CountAir® gebruikt kunnen worden.



- De CountAir® heeft een instelknop en een controleknop.



- Het beeldscherm kan ook worden ingesteld voor linkshandig gebruik. Wacht tot het beeldscherm leeg is. Houd de controleknop ingedrukt en druk de instelknop één keer in totdat het beeldscherm 180 graden is gedraaid.



- Bewaar de CountAir® met dosisaerosol in bijvoorbeeld een etui. Zo voorkomt u vervuiling of activering van de CountAir® en de dosisaerosol.



- Als de batterij bijna leeg is, verschijnen er twee verticale streepjes op het beeldscherm. De batterij gaat bij een gemiddeld gebruik twee jaar mee en is niet vervangbaar.

Reinigen



- Maak de CountAir® indien nodig schoon met een vochtige doek. De CountAir® niet afwassen, omdat deze niet waterdicht is.

Vervangen dosisaerosol



- Denk er aan dat u tijdig een nieuwe dosisaerosol in huis heeft. Wanneer de dosisaerosol leeg is, verschijnen er 4 streepjes op het beeldscherm.



- Haal de beschermcap van de dosisaerosol en haal de dosisaerosol uit de CountAir®.



- Plaats de beschermcap terug en gooi de lege dosisaerosol weg. Wanneer deze nog medicatie bevat, dient u deze af te geven bij uw apotheek. Stel de CountAir® opnieuw in door stap 1 t/m 4 van de voorzijde van deze kaart te herhalen.



- Herhaal vervolgens stap 5 en 6 van de voorzijde van de kaart.

Scan de QR-code voor de gebruikers-instructie van de fabrikant.



Scan de QR-code voor het instructiefilmpje.

